


Guide rapide LoFric Origo Pro

Wellspect®

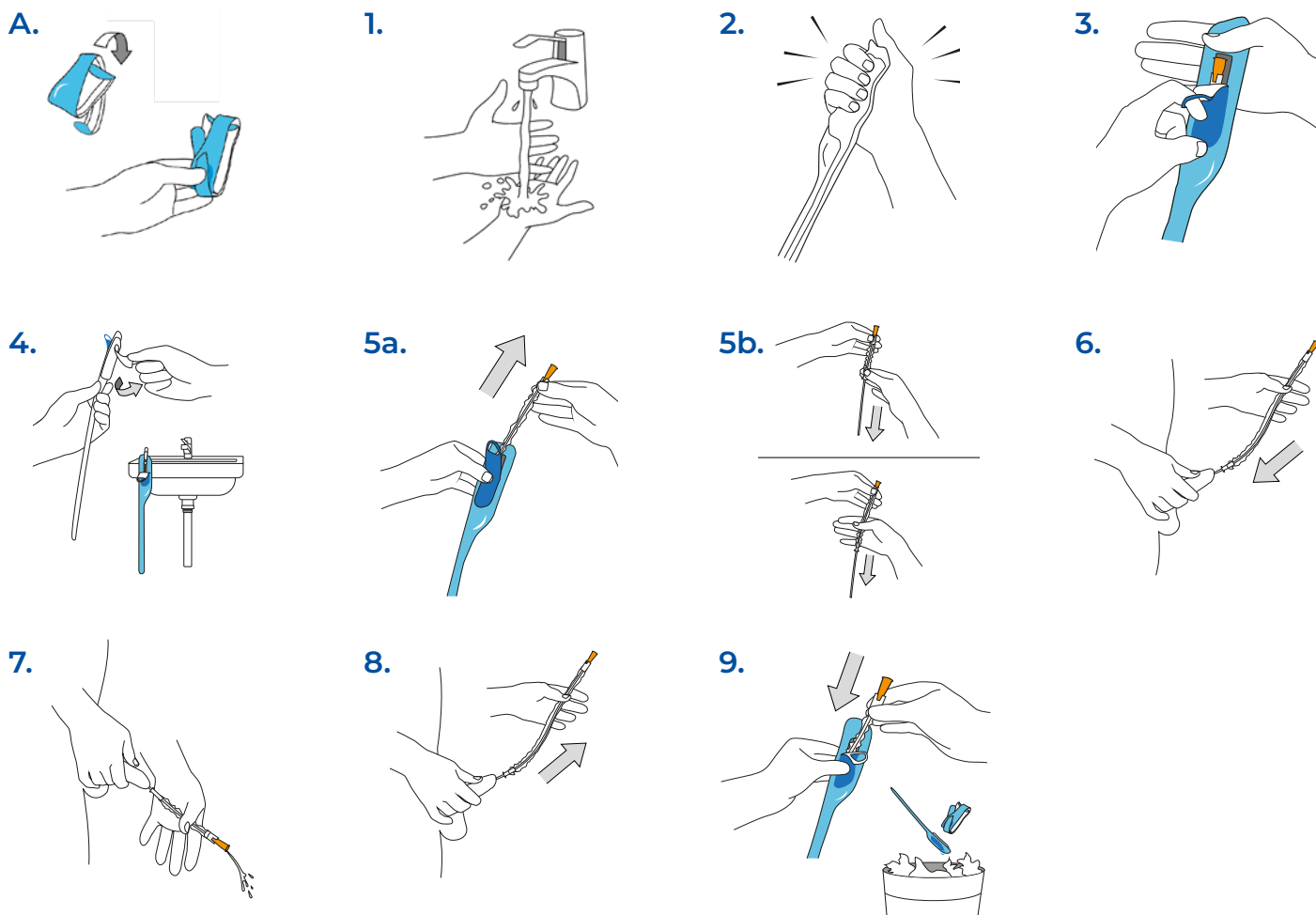

A. Conseils de stockage avant utilisation.
Pliable au format de poche. Utilisez la fente pour maintenir la sonde pliée.

- 1.** Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.
- 2.** Pressez pour libérer la solution (eau, sel) et la sonde est prête à l'emploi.
- 3.** Utilisez la boucle pour tirer vers le bas et ouvrir.
- 4.** Facultatif : utilisez la languette adhésive au verso pour fixer le produit sur une surface sèche et propre.
- 5. A :** Après avoir ouvert, pincez et tenez doucement la zone de préhension de la gaine pour faire descendre automatiquement la gaine protectrice en sortant la sonde. Utilisez la gaine protectrice pour gérer l'insertion sans avoir à toucher la tubulure de la sonde.

B : Optionnel : sortir la sonde. Tirez la zone de préhension de la gaine vers le bas afin de couvrir la tubulure de la sonde. Utilisez la gaine protectrice pour gérer l'insertion sans avoir à toucher la tubulure de la sonde.

- 6.** Soulevez le pénis vers le ventre pour rendre l'urètre rectiligne. Introduisez lentement la sonde dans l'urètre. Lorsque l'urine commence à s'écouler, insérez un petit peu plus la sonde pour assurer un débit régulier.
- 7.** Abaissez le pénis lorsque l'urine commence à s'écouler à travers la sonde.
- 8.** Attendez que le flux d'urine s'arrête pour garantir la vidange complète de la vessie. Retirez lentement la sonde.
- 9.** Remettez la sonde dans son emballage et jetez le tout en respectant la réglementation locale.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisez exclusivement la solution saline fournie pour humidifier la sonde.

Ne posez pas la sonde sur du papier ou du tissu, car ces surfaces risqueraient d'absorber le revêtement de la sonde.

Informations importantes

LoFric® Origo™ Pro, sonde urinaire, hydrophile, avec solution saline pour activation, avec de multiple orifices, conçue pour une vidange complète sans besoin de repositionner.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué et stérilisé par Wellspect HealthCare, Mölndal-Suède.

Indiquée pour la gestion de la vessie à court et à long terme par sondage urinaire intermittent.

Pour adultes et adolescents.

Avant utilisation, assurez-vous de bien suivre les conseils donnés par votre professionnel de santé lors de l'éducation sur la pratique du sondage.

Veuillez vous référer au mode d'emploi inclus dans la boîte pour les informations importantes et les instructions complètes.

N'hésitez pas à contacter votre prescripteur si vous rencontrez des difficultés. Rév : juillet 2026.

Chez Wellspect, nous développons des produits et des solutions innovants qui font une vraie différence dans la vie des personnes ayant besoin de soins pour l'incontinence, leur permettant ainsi de profiter pleinement de chaque jour. Nous sommes un leader reconnu dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans grâce à nos marques LoFric®, Navina™ et Surity™, et nous continuons à élargir l'accès à nos solutions pratiques. Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir les normes de qualité les plus élevées tout en minimisant l'impact environnemental de nos produits. En travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de santé et les personnes qui comptent sur nos solutions, nous visons à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site wellspect.fr

Rejoignez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

wellspect.fr

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France. Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone : +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

